



CBS 7.5
SCHRAUBEN SYSTEM

INDIKATIONEN:


- KOMPRESSIONSARTHRODESEN DES TALD- NAVICULAR- GELENKS SOWIE DES CALCANEAL- CUBOIDAL- GELENKES
- VERSTEIFUNG DES SUBTALAREN GELENKES
- VERSTEIFUNG VON CHARCOTARTHROPATHIEN
- KOMBINATIONSEINGRIFFE MIT TITANPLATTENOSTEOSYNTHESEN
- REVISION VON PSEUDOARTHROSEN
- SUBTALARE ARTHRODESE
- KORREKTUR VON FEHLGESTELLTEN ARTHRODESEN



TX 25




3 SCHARFE SELBSTSCHNEIDENDE SPITZEN, DESIGNED FÜR EINE EINFACHE UND SCHNELLE EINBRINGUNG

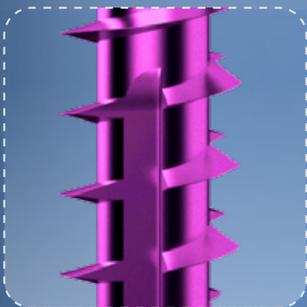

RÜCKWÄRTS SCHNEIDENDE
GEWINDEANSCHNITTE
FÜR EINFACHE
EXPLANTATION

VORWÄRTS SCHNEIDENDE

SCHRAUBEN ERZEUGEN
GEWINDEMUSTER WÄHREND
SCHRAUBENEINBRINGUNG

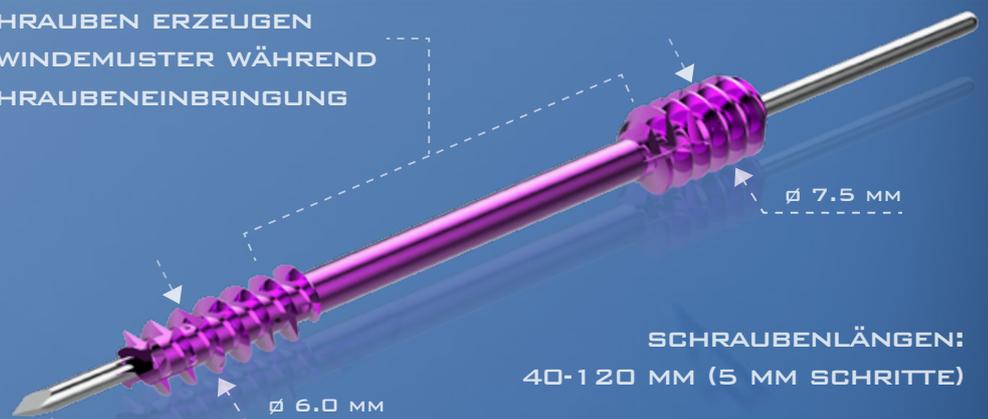

SCHRAUBENLÄNGEN:
40-120 MM (5 MM SCHRITTE)

INNEN $\varnothing 2.0\text{ MM}$
K-DRAHT $\varnothing 1.6\text{ MM}$

EINKERBUNG AN BEIDEN GEWINDEN

FÜHRT ZU EINEM FRÄSEFFEKT WELCHER DAS EINFACHE EINDREHEN DER SCHRAUBE ERMÖGLICHT UND ZU EINER PRÄZISEN SCHRAUBENPLATZIERUNG FÜHRT