




CBS 4.5
SCHRAUBEN SYSTEM

INDIKATIONEN:

- STABILISIERENDE ARTHRODESEN IN DER HAND-, FUSS- UND SCHULTERCHIRURGIE
- FIXATION VON OSTEOTOMIEN
- REKONSTRUKTION VON FRAKTUREN

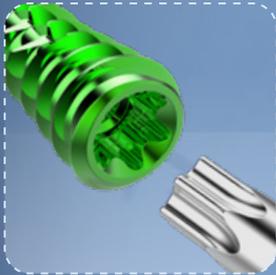

TX 10




RÜCKWÄRTS
SCHNEIDEND



RÜCKWÄRTS
SCHNEIDENDE
GEWINDEANSCHNITTE
FÜR EINFACHE
EXPLANTATION

VORWÄRTS SCHNEIDENDE SCHRAUBEN

ERZEUGEN
GEWINDEMUSTER
WÄHREND
SCHRAUBENEINBRINGUNG

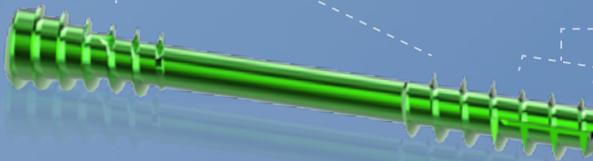

3 SCHARFE
SELBSTSCHNEIDENDE
SPITZEN, DESIGNED FÜR
EINE EINFACHE UND
SCHNELLE EINBRINGUNG

UNTERSCHIEDLICHE GEWINDESTEIGUNGEN

FÜHREN ZU GEWÜNSCHTEN
KOMPRESSIIONSKRÄFTEN



SCHRAUBENLÄNGEN:
18-72 MM

EINKERBUNG AN BEIDEN GEWINDEN

FÜHRT ZU EINEM FRÄSEFFEKT WELCHER
DAS EINFACHE EINDREHEN DER SCHRAUBE
ERMÖGLICHT UND ZU EINER PRÄZISEN
SCHRAUBENPLATZIERUNG FÜHRT

